


ASPIRADO NASOFARINGEO

Método asistido por vacío

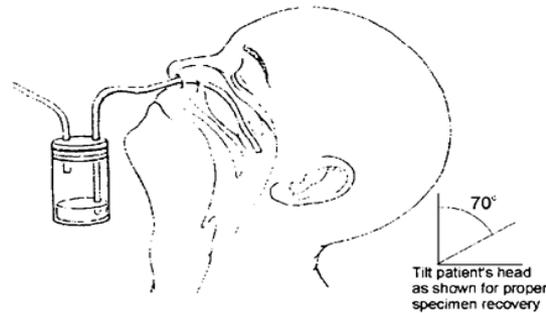

Material necesario:

Bomba de aspiración portátil
Catéter de succión Estéril
Trampa de moco (p.e. tubo de Luken)
Solución salina estéril no bacteriostática o medio de transporte viral (VTM).

1. Conecte la trampa de moco a la bomba de aspiración y al catéter, dejando el envoltorio del catéter de aspiración, encienda la aspiración y ajuste la presión.
2. Sin aplicar succión, inserte el catéter dentro de la nariz, dirigido hacia atrás y hacia la apertura del oído externo. NOTA: La profundidad de inserción necesaria para llegar a la faringe posterior, es equivalente a la distancia entre la fosa nasal anterior y la apertura externa de la oreja.
3. Aplique la succión. Usando un movimiento de rotación, retirar lentamente el catéter. NOTA: El catéter debe permanecer en la nasofaringe no más de 10 segundos.
4. Mantenga la trampa en posición vertical para evitar que las secreciones entren en la bomba.
5. Enjuague el catéter con 3 a 5 ml de solución salina estéril no bacteriostática, o medio de transporte viral, desconecte la aspiración, conectar el tubo al brazo de la trampa de moco para sellar.

Edad	Tamaño Cateter (French)**	Presión Succión
Prematuros	6	80-100 mmHg
Lactantes	8	80-100 mmHg
Preescolares	10	100-120 mmHg
Escolares	12	100-120 mmHg
Adolescente/ Adulto	14	120-150 mmHg

** Para determinar la longitud del tubo del catéter, medir la distancia desde la punta de la nariz a la apertura externa de la oreja.

Método jeringa y catéter

Material necesario: catéter estéril
jeringa de 5-10cc
solución salina estéril
contenedor estéril

Normas de recogida:

1. Inserte el catéter dentro de la nariz, dirigido hacia atrás y hacia la apertura del oído externo. NOTA: La profundidad de inserción necesaria para llegar a la faringe posterior, es equivalente a la distancia entre la fosa nasal anterior y la apertura externa de la oreja.
2. Introducir 1-2 ml de solución salina estéril en la nasofaringe.
3. Aspirar con la jeringa e introducir el moco obtenido en un frasco estéril (contenedor verde).
Usando un movimiento de rotación, retirar lentamente el catéter. NOTA: El catéter debe permanecer en la naso-faringe no más de 10 segundos.

Enviar al Laboratorio de Microbiología .